



# GLOBUS

## LIPOZERO G150

### Ultrason esthétique



#### 52 PROGRAMMES

**9 CaviMax150 – 10 MF-Plus - 5 Mobilisation Adiposité NorAd-526 – 2 Adiposité Masculine - 8 Beauté – 8 Peau – 10 Santé**

LA CAVITATION Ultrasonique est la méthode la plus efficace pour combattre la cellulite et éliminer les graisses superflues.

#### MECANISME D'ACTION:

- Quand les tissus adipeux sont touchés en profondeur par l'énergie ultrasonique à basse fréquence, des phases cycliques de compression et de décompression se produisent qui génèrent des cavités contenant des gaz et de la vapeur.
- Grâce à ce mécanisme, les cavités continuent leur expansion et leur compression de façon toujours plus intense jusqu'à leur explosion, participant ainsi à la destruction progressive des tissus adipeux.
- Les graisses contenues dans les adipocytes sont ainsi libérées et éliminées au travers de la circulation sanguine, sans altérer les tissus voisins.

#### LES FREQUENCES DE LA CAVITATION PROFESSIONNELLE GLOBUS

Le mécanisme cavitationnel se produit de façon efficace seulement à basse fréquences, inférieures à 600 KHz, car seules ces fréquences pénètrent en profondeur pour détruire les tissus adipeux. Plus basse est la fréquence plus profonde est l'onde de choc.

- **150 KHz** pour la cellulite et l'adiposité peu épaisse et peu profonde (professionnelle)
- **526 KHz** pour associer la démolition adipeuse à la production de Noradrénaline (NorAd-526) qui brûle les graisses en accélérant le métabolisme. Fréquence utilisée pour l'adiposité abdominale masculine.
- **3 MHz** pour les traitements de beauté plus superficiels et pour la peau.

#### MF PLUS - TRAITEMENTS MULTIFREQUENCES: EXCLUSIVITE MONDIALE GLOBUS

Des recherches scientifiques internationales ont démontré que l'application de Cavitation à modulation de fréquence (fréquences différentes alternées) permet d'obtenir des résultats meilleurs car l'association de différentes fréquences permet d'agir simultanément à des profondeurs différentes et de personnaliser les traitements en fonctions du type de cellulite.


#### PROGRAMMES TERAPEUTIQUES

LIPOZERO G150 est aussi fourni avec une série de programmes thérapeutiques pour le traitement des principales pathologies en fréquence de **1 MHz**

**NOUVELLE MALLETTE STYLE:** LIPOZERO 150 est fourni avec une nouvelle mallette, pratique et moderne, en aluminium qui en facilite le transport.

#### 52 PROGRAMMES — 30 programmes libres:

- 9 CAVITATION CAVIMAX 150 KHz
- 10 MF-PLUS — TRAITEMENTS MULTIFREQUENCES
- 5 MOBILISATION ADIPOSITE NorAd-526
- 2 ADIPOSITE MASCULINE
- 8 BEAUTE
- 8 PEAU
- 10 SANTE

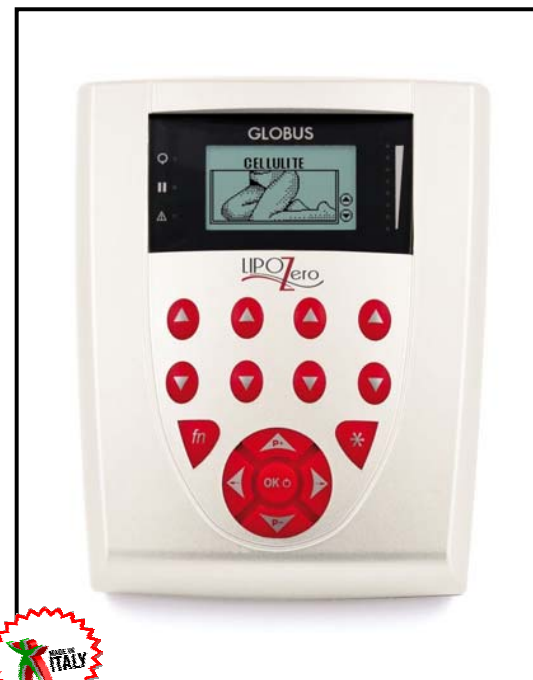

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 3 W/cm<sup>2</sup>  
Sortie: 1 - Tête ultrason: 1 Ø mm42 - IP 65  
Alimentation: secteur 220V 50/60 Hz ou batterie rechargeable (EN OPTION)  
Dimensions: 17 x 22 x 6 cm  
Ecran Graphique RETRO-ECLAIRE  
Emission: continue et pulsée  
Fréquences d'émission: 3 MHz, 1 MHz, 526 KHz et 150 KHz  
Dispositif **CE**  
Standard: EN 60601-1 EN 60601-1-2

#### EQUIPEMENT

- 1 mallette aluminium
- 1 ultrason Lipozero G150
- 1 Tête étanche Multifréq. (3 e 1 MHz, 526 e 150 KHz )
- 1 Gel de contact
- 1 alimentateur
- 1 mode d'emploi



# GLOBUS

JFB MEDICAL

46 route des bancs de pierre 69690 BESSENAY

Tel 04 74 70 89 08

# LIPOZERO G150

## Liste programmes

### CAVIMAX 150 KHz

Lipolyse  
Lipolyse abdominale  
Cellulite  
Cellulite Oedémateuse  
Cellulite fibreuse  
Culotte de cheval  
Cellulite Oedémateuse jambes  
Cellulite fibreuse jambes  
Cellulite avec effet peau d'orange

### MF-PLUS

Lipolyse  
Cellulite  
Cellulite Oedémateuse  
Cellulite fibreuse  
Culotte de cheval  
Cellulite avec effet peau d'orange  
Adiposité masculine abdomen  
Adiposité masculine taille  
Adiposité masculine membres inf.  
Adiposité masculine membres sup.

### MOBILISATION ADIPOSITE NorAd-526

Lipolyse-NorAd-526  
Cellulite- NorAd-526  
Adiposité- NorAd-526  
NorAd-526 1  
NorAd-526 2

### ADIPOSITE MASCULINE

Adiposité masculine abdomen  
Adiposité masculine taille

### BEAUTE

Massages  
Modelage  
Modelage jambes  
Drainage  
Drainage jambes  
Drainage bras  
Vergetures  
Applications principes actifs

### PEAU

Acnée  
Lifting Visage  
Traitement rides  
Cicatrices  
Couperose  
Furoncles corps  
Furoncles visage  
Restructuration peau

### SANTE

Sciatique  
Lombalgie  
Arthrite  
Tunnel Carpal  
Néuralgie  
Tendinites  
Epicondylite  
Périarthrite  
Entorse  
Contusions

